



INNOVÁCIÓS ÉS TECHOLÓGIAI
MINISZTERIUM

A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja



Rescue Security & Safety V. (2021)

Önkéntes tűzoltó egyesületek védekezése a koronavírus-járvány során

Védőkesztyű- és védőmaszk-használati útmutató




INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM

A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja



BALATON
FEJLESZTÉSI TANÁCS

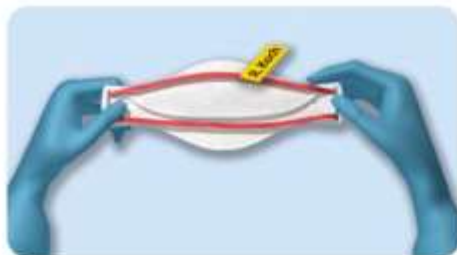

Tiszta kesztyűvel fogja meg az FFP2
maszkot a gumipántoknál fogva!



Hajtsa ki a maszkot teljesen, a külső
felével lefelé!



Helyezze a maszkot az arcára, hogy
szorosan illeszkedjen!



Pozícionálja a gumipántokat
megfelelően!



Igazítsa helyére a maszkot,
amennyiben esetleg elcsúszott a
pántok felhelyezésénél!



Igazítsa meg az orrpántot, hogy a
maszk az orrnyergén is megfelelően
illeszkedjen!



Fogja meg a pánt tetejét az egyik
ujjával, majd másik keze két ujjával
oldalról szorítsa rá orrnyergére!



Amennyiben szükséges, tegyen fel
védőszemüveget!



A pántot igazítsa a helyére, a fül fölé!



Igazítsa meg a szemüveget, ha
szükséges!



Ellenőrizze, hogy minden megfelelően
illeszkedik!

A maszk felvétele



INNOVÁCIÓS ÉS TECHOLÓGIAI
MINISZTERIUM

A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja



BALATON
FEJLESZTÉSI TANÁCS



Tiszta kesztyűt használjon a maszk
levételéhez!



Hajoljon enyhén előre, hogy
megkönnyítse a maszk levételét!



Két kézzel fogva emelje át a szemüveg
pántját a feje felett!



A pántnál fogva dobja el a
védőszemüveget!



A szemüveg levétele után a kesztyűt
vagy lecserélni, vagy fertőtleníteni
szükséges!



Óvatosan fogja meg a maszk pántját!



A pántot emelje át a feje felett!



Vigyázzon, hogy a pánt lehetőleg ne
érjen az arcához!



Emelje el a pántokat a fejétől!



A pántnál fogja a maszkot!



A pántnál fogva dobja ki a maszkot!

A maszk levétele



INNOVÁCIÓS ÉS TECHOLÓGIAI
MINISZTERIUM


A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja



BALATON
FEJLESZTÉSI TANÁCS



Készüljön elő a megfelelő szemetessel!

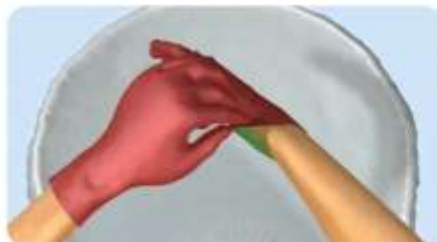

A szélénél fogja meg a kesztyűt!



A szélénél fogva húzza le a kesztyűt...



...úgy, hogy a kesztyű belseje kerüljön
kívülre!



Ismételje meg a másik kesztyűvel is...



...fordítsa ki az elsőhöz hasonlóan!



Vigyázzon, hogy mindig az egyik
kesztyű „anyagával” fogja meg a
másikat!



A két kesztyűt dolgozza egymásba!



Vigyázzon, a kesztyű külsejéhez ne
érjen!



A két kesztyűt dobja ki!



Alaposan tisztítsa meg a kezét!

A kesztyűk levétele



INNOVÁCIÓS ÉS TECHOLÓGIAI
MINISZTERIUM

A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja



A maszk nem fedi az orrot



A maszk orrpántja nincs leszorítva



A maszk nincs teljesen széthajtva



A maszk fordítva van (orr-rész alul)



A maszk nem fedi az arcot



A maszk szakáll miatt nem illeszkedik



A haj nincs összefogva



A maszk a csuklya felett



A pántok nem megfelelő helyen



A pántok összetekeredtek



A pánt a fülön átvezetve

FFP2
maszkhasználati
hibák